

BG

Апимед® Хемопро маз

ОБЛЕКЧАВА ДИСКОМФОРТА ПРИЧИНЕН ОТ ХЕМОРОИДИ

Медицинско изделие:

Ефектът на медицинското изделие, за разлика от лекарствата, е главно физически.

Състав:

ВАЗЕЛИН, ЛАНОЛИН, АЛКОХОЛ, ВОДА, ПРОПОЛИС, ПОДРУМИЧЕ (ANTHEMIS NOBILIS).

Предназначение:

Апимед Хемопро маз осигурява защитен филм, предпазващ ректалната мукоза от дразнене и болезнена дефекация.

Апимед Хемопро маз образува защитен филм върху увредената ректалната мукоза и така облекчава симптомите причинени от хемороиди (напрежение, болка, парене, сърбеж), които често са следствие от вторично възпаление на аналната област. Образуваният филм не допуска контакт между фецеса и увредената мукоза. С така улеснената дефекация (без болка и напрежение), мукозата се възстановява много бързо.

Инструкции за употреба:

По време на острите периоди нанасяйте Апимед Хемопро маз на почистената аноректална област сутрин и вечер. След облекчаване на острите симптоми нанасяйте само вечер. Също така, може да се нанася с апликатора, който се завинтва на тубата на мястото на капачката. Преди употреба сваляте протектора от върха на апликатора.

⚠️ Противопоказания

Алергична реакция, причинена от свръхчувствителност към някоя от съставките на продукта.

Внимание

Да не се употребява от лица, алергични към прополис.
Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Съхранение

Да се съхранява на сухо и хладно място.

Нетно количество:

20 g, REF 1101

40 g, REF 1107

🏭 Производител:

APIPHARMA d.o.o., Jeronima Kavanjina 26, 10090 Zagreb, Хърватия

Дистрибутор:

Ведра Интернешънъл АД, София 1407, ул. Червена стена 58, ап. 1


Серийният номер и срокът на годност са отпечатани на опаковката.



Символи на опаковката:

	Преди употреба прочетете инструкцията
	Срок на годност
	Дата на производство
	Внимание
	Производител
	Серийен номер
	Каталожен номер

Начин на употреба

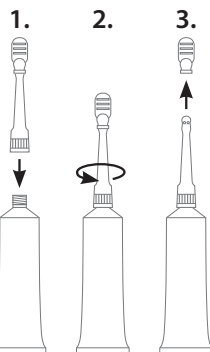

EN

Apimed® Hemopro ointment

FOR EASING THE DISCOMFORT CAUSED BY THE HEMORRHOIDS

Medical device:

The effect with medical device, as opposed to drugs, is primarily physical.

Ingredients:

PETROLATUM, LANOLIN CERA, ALCOHOL, AQUA, PROPOLIS CERA, ANTHEMIS NOBILIS

Intended use:

Apimed Hemopro ointment provides protective film for decreasing the rectal mucosa irritation and painful defecation.

Apimed Hemopro ointment creates protective film on the damaged rectum mucosa and thus facilitates the unpleasant symptoms caused by hemorrhoids (flatulence, pain, burning, itching), which are usually the result of secondary inflammation in the anal area. The resulting film prevents contact between the stool and damaged mucosa. With facilitated defecation (without pain and strain), mucosa recovers very quickly.

Instructions for use

During the acute periods, apply Apimed Hemopro ointment on clean anorectal area in the morning and in the evening. Later, when symptoms relieve apply only in the evening. It can also be applied by using applicator put on the tube instead of the cap. Before use, remove the protector from the applicator's top.

⚠️ Contraindications

Allergic reaction caused by hypersensitivity to an ingredient of the product.

Caution:

Persons allergic to propolis should not use this product!
Keep out of the reach of children

Safekeeping:

Store in a dry and cool place.

Net quantity:

20 g, REF 1101


40 g, REF 1107

APIPHARMA d.o.o., Jeronima Kavanjina 26, 10.090 Zagreb, Croatia, EU

Batch number and Expiry date are printed on the package.



Application

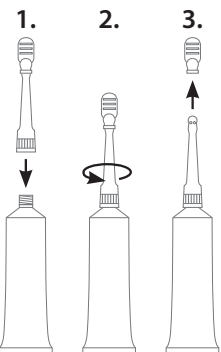

Explanation of the symbols appearing:

	Consult instructions for use
	Expiry date
	Date of manufacture
	Warning
	Manufacturer
	Lot number
	Reference number